




BIOPTRON® 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

फ़िल्टर

हिन्दी

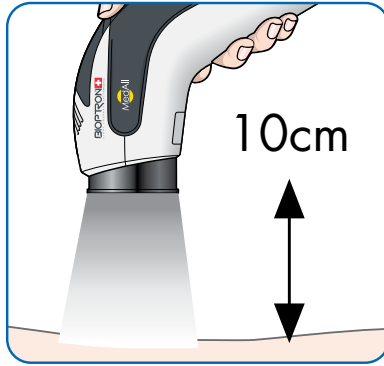

1



2



3



4

किस तरह से इस्तेमाल करें?

10 सेमी की दूरी से, BIOPTRON डिवाइस को वांछित फ़िल्टर सहित उस क्षेत्र को कवर करने के लिए रखें जिसे आप इलाज करना चाहते हैं (चित्र 1)। रंग फ़िल्टर के व्यास से बड़ी जगहों का इलाज करते समय, सुझाए गए समय के अनुसार एक-एक करके उनका इलाज करें।

फ़िल्टर कैसे बदलें? ?

ध्यान से और बिना जोर लगाए फ़िल्टर को हटा दें बदलने करने के लिए (चित्र 2) और चित्र 3 में बताए अनुसार वांछित रंग फ़िल्टर डालें।

फ़िल्टर को कैसे साफ करें?

फ़िल्टर को कैसे साफ़ करें? (चित्र 4)

1. फ़िल्टर के बाहरी रिंग को पकड़कर डिवाइस से फ़िल्टर निकालें।
2. कांच की सतह पर खुरचन आने से बचाने के लिए मुलायम, गीले, लिट-फ्री कपड़े का इस्तेमाल करें।
3. फ़िल्टर को दूसरे लिट-फ्री कपड़े से सुखाएं।

वारंटी

- 5 साल अगर जैसा किया जाना चाहिए उस तरह से उपयोग किया जाता है और यदि चेतावनियों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है
- इस वारंटी में सामग्री और विनिर्माण सम्बन्धी खराबियां सम्मिलित हैं
- इस वारंटी में सामान्य टूट-फूट से एस्थेटिक में होने वाले बदलाव शामिल नहीं हैं जो उत्पाद के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करते हैं, या उत्पाद के दुरुपयोग की वजह से होने वाले नुकसान पर असर नहीं डालते हैं।

चेतावनी

1. कांच की सतह और फिल्टर रिंग के अंदरूनी या बाहरी हिस्से को साफ करने के लिए किसी भी कैमिकल (जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल) को ना इस्तेमाल करें।
2. धूप के संपर्क में आने से धूल और मलिनिकरण को रोकने के लिए फिल्टर को एक सुरक्षात्मक थैली में रखें।
3. फिल्टर नाजुक कांच से बना होता है, इसलिए इसे संभालने में सावधानी बरतनी चाहिए।
4. उपयोगकर्ता को फिल्टर लेंसों को हटाने की अनुमति नहीं है।



PMD-ME145-22-EN
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

हिन्दी